

Gymna Cryoflow ICE-CT

Kryotherapie mit Infrarot-Feedback-System
für optimale Temperaturkontrolle



gymna[®]

gymna.com

Gymna Cryoflow ICE-CT

Erwiesene Effektivität für schnellere Rehabilitation bei akutem Trauma

Kryotherapie wird seit Jahrhunderten angewandt. Inzwischen sind die Vorteile wissenschaftlich bewiesen. Durch Verzögerung der Nervenleitung wird Schmerz gelindert. Die Therapie verzögert den Entzündungsprozess durch Verminderung der metabolen und enzymatischen Reaktionen und Muskelspasmen nehmen durch Senkung der Muskelspindelfaseraktivität ab.



SCHMERZLINDERUNG

Es werden weniger
Schmerzmedikamente
benötigt

Effizientere
Behandlungsmöglichkeiten

ENTZÜNDUNGSHEMMEND UND ABNAHME DER SCHWELLUNG

Vermeidet langwierige
Rehabilitation

Schnellere
Wiederaufnahme der
Aktivität

MUSKELRELAXATION

Verbesserte
Muskeldehnung durch
Krampfreduktion

Verbesserter
Bewegungsumfang

= Schnellere Rehabilitation




Weitere Anwendungen: bei Spastizität, Rheumapatienten, prä- und postoperativ, Arthrose, Rehabilitation nach Belastung, Triggerpunkttherapie, nach Amputationen,...

EINZIGARTIGES
Infrarot-
Feedback-
System

Gymna Cryoflow ICE-CT

Optimale Temperaturkontrolle

Der Gymna Cryoflow ICE –CT hat ein einzigartiges Infrarot-Feedback-System für eine optimale Temperaturreglung, was ein maximales Ergebnis garantiert.

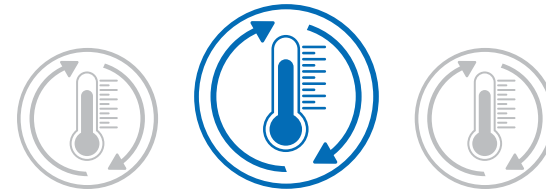

EINZIGARTIGES INFRAROT-FEEDBACK-SYSTEM

- **Konstante Messung** der Hauttemperatur durch Infrarotsensor
- **Luftstrom wird automatisch angepasst**, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu erhalten
- **Maximales Ergebnis:**
 - Vermeiden von zu hohen Temperaturen, also 0-Effekt
 - Vermeiden von zu niedrigen Temperaturen und damit von Risiken auf Frostwunden und Nervenschäden



KRÄFTIGER LUFTSTROM

Die **Hauttemperatur** sinkt innerhalb von einer Minute auf 12° C, um die gewünschten metabolischen Reaktionen sofort in Gang zu setzen



Kurze Behandlungsdauer durch sehr schnelles Erreichen der niedrigen Temperaturen



Kompressionseffekt, bietet zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten wie Lymphdrainage durch Kombination aus Abtasten und Kompression

Gymna Cryoflow ICE-CT

Sehr effiziente und einfache Art der Kryotherapie

DER GYMNA CRYOFLOW ICE-CT IST MIT INTELLIGENTEN LÖSUNGEN FÜR IHREN KOMFORT AUSGESTATTET:



Dynamische Behandlungsmethode



35 vorprogrammierte Einstellungen auf der Grundlage von Indikationen oder Zielsetzungen



Benutzerfreundlich, kein Nachfüllen



Kurze Therapiedauer durch starke Temperatursenkung



Verschiedene Düsen auf der Grundlage des zu behandelnden Bereichs



2 Behandlungsmethoden: die statische und freihändige oder die dynamische und manuelle



Statische Behandlungsmethode

Verschiedene Düsen:

5 mm Düse



Punktuell für die Behandlung von Triggerpunkten oder Schmerzpunkten

15 mm Düse



Lokale Abkühlung

20 mm Düse



Lokale Abkühlung für größere Oberflächen

NEU

Gymna Physio Care

Hochwertige Massagelotionen für Profis



Kryotherapie



Diathermie



Stoßwellentherapie



Physio Care



Therapieliegen



Elektrotherapie



Active Motion



Ihr Händler:

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511